

Gebrauchsanweisung für das Evakuierungstuch von Evatex

Das Produkt

Diese Anleitung gilt für die folgenden Versionen der Evatex-Evakuierungsdecke:

- Evatex Evakuierungslaken Standard (90x200)
- Evatex Evakuierungsplane Vario (90x200, 100x200, 120x200 und 90x220)

Das Evatex Evakuierungstuch ist ein Rettungstuch, das unter die Matratze eines Bettes gelegt werden kann und so eine sichere und schnelle Evakuierung von Personen gewährleistet, die bettlägerig sind oder nicht einfach/schnell aus dem Bett aufstehen können.

Das Evatex Evakuierungstuch stellt sicher, dass diese Personen in einer Notfallsituation trotzdem bewegt (evakuiert) werden können und ist somit eine lebensrettende Hilfe.

Das Evatex Evakuierungstuch kommt beispielsweise in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Wohngruppen zum Einsatz und wird beispielsweise vom Evakuierungshelfer oder der Feuerwehr eingesetzt.

Anbringen der Evatex-Evakuierungstuch

- Entfernen Sie die Matratze vom Bett.
- Legen Sie die Evakuierungstuch von Evatex auf den Lattenrost.
- Legen Sie das Evatex Evakuierungstuch so aus, dass das Etikett und die Gurte sichtbar sind (die Richtung des Fußendes ist auf dem Etikett angegeben).
- Die Sicherheitsgurte werden gefaltet und in die dafür vorgesehenen Taschen eingelegt. Unbedingt die Schnallen in die Taschen lösen.
- Anschließend können Sie die Matratze auflegen.
- Legen Sie die Gurte an den Ecken des Evatex-Evakuierungstuchs um die Ecken der Matratze herum.
- Ziehen Sie die Sicherheitsgurte zwischen Matratze und Bett heraus, damit diese bei einer Evakuierung schneller gefunden werden können.


Täglicher Gebrauch

- Das Evatex Evakuierungstuch liegt (wie ein Matratzenschoner) zwischen der Matratze und dem Lattenrost.
- Überprüfen Sie beim Bettmachen, ob die Gurte die Eckbänder der Matratze noch festhalten.
- Wenn die Sicherheitsgurte ausstecken, wieder anbringen so wie oben beschrieben.

Im Falle einer Evakuierung

- Ein Retter evakuiert eine Person.
- Erklären Sie dem zu Patienten, was passieren wird.
- Sichern Sie den Patienten mit den Sicherheitsgurten (die über den Bettbezug/die Decke gehen).
- Bei einer Anti-Dekubitus-Matratze: Schläuche lösen und ggf. festbinden.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Bett in der niedrigsten Position befindet (dieser Schritt entfällt bei Stromausfall).
- Fassen Sie mit beiden Händen die (Griff-)Schlaufen am Fußende.
- Ziehen Sie die Matratze mit dem Patienten (Füße zuerst) in einem Winkel von 75 bis 90 Grad zur Bettoberfläche.
- Wenn der Patient nur mit dem Oberkörper auf dem Bett liegt, lassen Sie die Matratze sanft über den Boden gleiten.
- Fassen Sie mit beiden Händen die (Griff-)Schlaufen am Fußende und ziehen Sie die Matratze mit ausgestreckten Armen und geradem Rücken nach hinten über den Boden.
- Bei Evakuierung über die Treppe: Vor der Treppe und bei den ersten Stufen schneller fahren.
- Sobald die Matratze auf der Treppe steht, gleitet die Matratze leichter.
- Die Matratze schützt den Bewohner weitgehend vor Stößen.

- Matratze und Bettwäsche verbleiben für einen eventuellen Weitertransport beim Bewohner.

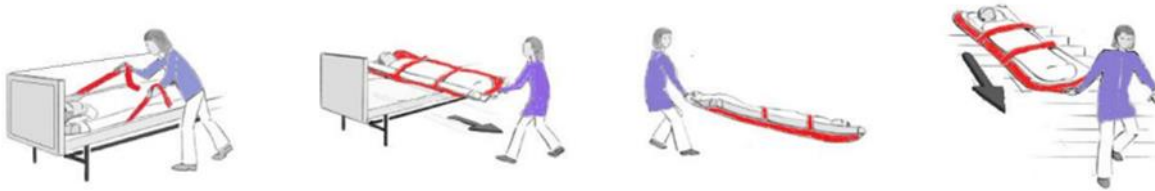

Wasch- und Pflegehinweise

- Achten Sie darauf, die Schnallen vor dem Waschen zusammen klicken!
- Verwenden Sie für Krankenhäuser übliche Industriereiniger!
- KEINE Zugabe anderer Produkte!
- Sie können das Evatex- Evakuierungstuch bei einer Temperatur von bis zu 95 Grad waschen.
- 10 Minuten 105 Grad temperaturbeständig bei thermischen Desinfektionsverfahren.
- BLEICHEN NICHT ERLAUBT!
- Nur bei niedriger Temperatur bügeln (Bügeln normalerweise nicht erforderlich).
- Chemische Reinigung nicht gestattet!
- TROCKNUNG an der Raumluft empfohlen (Trocknen im Wäschetrockner nur bei niedriger Temperatur).
- Drücken nicht erlaubt!
- Bei INFektion/Verdacht: Warm waschen (95 °C) oder bei 60 °C mit Desinfektionsmittel waschen

Kontakt

- Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns über die untenstehenden Kontaktdaten erreichen.
- Gerne bieten wir Ihnen auch Schulungen zu unserem Produkt an.
- Wir empfehlen Ihnen, einmal im Jahr eine Evakuierung zu üben.
- Wenn die Evatex-Evakuierungsfolie anders aussieht oder beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht und kontaktieren Sie uns.
- Wir würden gerne hören, wie Sie unser Produkt erleben (und ob Sie Verbesserungsvorschläge haben)!
- Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit diesem Gerät muss dem Hersteller und der Gesundheits- und Jugendaufsichtsbehörde gemeldet werden.



Hersteller:

E.E.H. ug (haftungsbeschränkt)
 Oberstr 3
 47829 Krefeld
 +49-2151-964406
Info@evatex.de



Medizinisches Hilfsmittel, Klasse I